



FDA Zertifiziert USA

Gekennzeichnet

- **ALUMINIUMGESTELL**, faltbar für einen einfachen Transport, **Umstellbar von Anterior auf Posterior und umgekehrt**.
- **BECKEN und THORAXFÜHRUNG** Unabhängig in Höhe, Breite und Umfang einstellbar, ermöglicht dank der Rückenöffnung einen einfachen Zugang. Es umfasst das Kind wie ZWEI HÄNDE und verleiht ihm dadurch ein Gefühl der Sicherheit, weshalb es sich völlig angstfrei auf den Schrittablauf konzentrieren kann.
- **JUSTIERLEISTEN** als Referenz für Höheneinstellungen.
- **ERGONOMISCHE SITZHOSE**, bequem und verstellbar, kann für die Reinigung einfach abgenommen werden. Stützt das Kind bei Bedarf, ohne Druck im Genital- und Leistenbereich auszuüben.
- **RÄDER** Pannenfrei und leicht: zwei schwenkbare Vorderräder von Ø 15 cm und zwei Vollgummi Hinterräder Ø cm 20, sowohl für den Innen- wie auch für den Außenbereich.
- **RICHTUNGSSTABILISATOREN** an den Vorderräder.
- **RÜCKLAUFSPERRUNG, EINSTELLBARE BREMSEN**, Parkbremse an den Hinterrädern einfach mit dem roten Pedal zu bedienen.
- **HALBELASTISCHE SCHUTZPUFFER** an den Vorderrädern als Schutz gegen Stöße.




Achtung!
Lesen Sie sorgfältig die
Gebrauchs- und Wartungs
Anweisungen

ANTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung

von 53 bis 79 cm

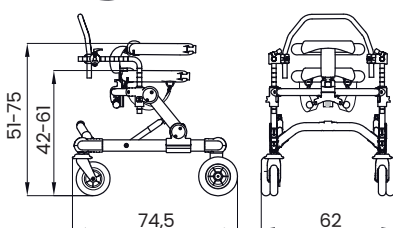


Gesamtgewicht kg. 13,5

Max. Belastung kg. 35

POSTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung

von 53 bis 79 cm

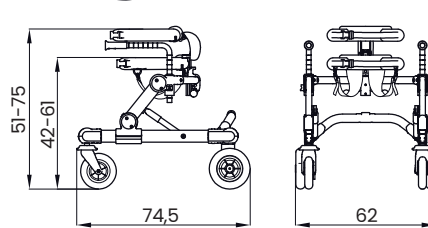


Gesamtgewicht kg. 15

Max. Belastung kg. 35

HÖHE DES BENUTZERS:



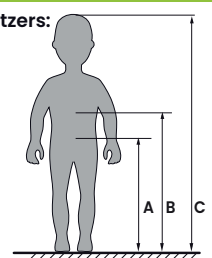




Höhe des Benutzers:
min cm 75
max cm 100



WICHTIG:
Sich versichern dass die Höhen A und B mit den Höhen des Becken - und Thoraxringes übereinstimmen.

Anterior

Posterior

WÄHLEN SIE DIE KONFIGURATION >	Anterior				Posterior		
	PT	PA	P	PTM	PT	PA	P
KOMPONENTEN ▾	 Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	 Mit: > Transparenter Tisch > Haltebügel > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose	 Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe
865 Multiverstellbare Kopfstütze	NV	NV	NV	NV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925	<input type="checkbox"/> VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925
925 Thoraxführung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur nach Entfernung des transparenten Tisches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Beckenführung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
930 Ergonomische Sitzhose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
894 Rückengurt für den Tisch von Grillo mini PTM	NV	NV	NV	<input type="checkbox"/>	NV	NV	NV
926 Verstellbarer Haltebügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NV	NV	NV
809 mini Unterarmauflagen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
809 mini Unterarmauflagen mit gebogenen Stangen	NV	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	<input type="checkbox"/> Wenn die Handgriffe und der Tisch entfernt sind	NV	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
943 mini Armgurte	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar
937 ergonomische Griffe für Grillo mini PTM	NV	NV	NV	<input type="checkbox"/> nur nach Entfernung des Haltebügel	NV	NV	NV
927 abnehmbare Handgriffe	NV	NV	NV	NV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
946 ergonomischer Sattel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-SC distaler Abduktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
923 Schiebehilfe für den Begleiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>