

Der Gehtrainer GRILLO fördert und erleichtert das Gangbild, trainiert die Balance des Beckens und des Rumpfes, organisiert eine weitere und strukturierte Sicht der Räume, der Abstände und der Umgebung des stehenden Benutzers, entwickelt physische Autonomie und psychische Unabhängigkeit, gibt das Erlebnis der Fähigkeit, allein zu arbeiten, ohne die Hilfe von anderen.

Grillo kompensiert den Mangel an Gleichgewicht dank der ergonomischen Unterstützung und des stabilen Untergestelles und ermöglicht somit dem Benutzer, sich auf die Gehfähigkeit zu konzentrieren.

Grillo ist vielseitig und anpassbar dank austauschbaren Teilen, ohne Einsatz von Werkzeugen für verschiedene Krankheitsbilder geeignet.



FDA Zertifiziert USA

Gekennzeichnet **CE**



- **LEICHTES ALUMINIUMGESTELL**, faltbar für einen einfachen Transport mit **PATENTIERTEM HÖHE EINSTELLSYSTEM**
- **BECKEN und THORAXFÜHRUNG** gepolstert, unabhängig in Höhe, Breite und Umfang einstellbar, ermöglicht dank der Rückenöffnung einen einfachen Zugang. Es umfasst das Kind wie **ZWEI HÄNDE** und verleiht ihm dadurch ein Gefühl der Sicherheit, weshalb es sich völlig angstfrei auf den Schrittablauf konzentrieren kann. Die Thoraxführung ist einstellbar in Neigung und Rückwärts-Vorwärts.
- **ERGONOMISCHE SITZHOSE** bequem und verstellbar, kann für die Reinigung einfach abgenommen werden. Stützt das Kind bei Bedarf, ohne Druck im Genital- und Leistenbereich auszuüben.
- **HALTEBÜGEL**, abnehmbar und in der Höhe einstellbar es wird als Referenz benutzt und als Armlehne
- **UNTERARMSTÜTZEN**, verstellbar in der Höhe, Neigung,

Rotation und Tiefe.

- **Exklusive ORMESA DESIGN RÄDER**, leicht und Pannensicher: 2 Vorderräder schwenkbar, Ø15 cm (Größe Mini und Small) und Ø 17,5 cm (Größe Medium und Large) und 2 Vollgummi Hinterräder, Ø 20 cm (Größe Mini und Small) und Ø 25 cm (Größe Medium und Large).
- **EINSTELLBARE BREMSEN, RÜCKLAUFSPERRUNG und PARKBREMSEN** an den Hinterrädern einfach mit dem roten Pedal zu bedienen
- **RICHTUNGSSTABILISATOREN** an den Vorderrädern.
- **HALBELASTISCHE SCHUTZPUFFER** an den Vorderrädern als Schutz gegen Stöße.



Achtung!
Lesen Sie sorgfältig die
Gebrauchs- und Wartungs
Anweisungen

ANTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung

von 60 bis 86



Gesamtgewicht KG 19
Max. Belastung 45 KG

POSTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung


von 60 bis 86



Gesamtgewicht KG 18,5
Max. Belastung KG 45

HÖHE DES BENUTZERS:

Höhe des Benutzers: (C):
GRILLO Small von 90 bis 135 cm

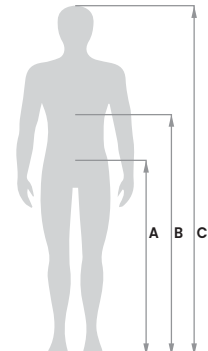

WICHTIG:
Sich versichern dass die Höhen A und B mit den Höhen des Becken - und Thoraxringes übereinstimmen.



Anterior

Posterior

WÄHLEN SIE DIE KONFIGURATION >	Anterior			Posterior		
	PT	PA	P	PT	PA	P
KOMPONENTEN v 925, 924 Sie können die kleinere Größe wählen	 Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	 Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	 Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe
865 Multiverstellbare Kopfstütze	NV	NV	NV	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925
925 Thoraxführung <small>mini</small>	●	□	□	●	□	□
924 Beckenführung <small>mini</small>	●	●	●	●	●	●
930 Ergonomische Sitzhose	●	●	●	●	●	●
926 verstellbarer Haltebügel	●	□	●	NV	NV	NV
809 Unterarmauflagen	□	●	□	□ Mit Gelenke	●	□ Mit Gelenke
943 Armgurte	□ nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	□	□ nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	□ nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	□	□ nur in Verbindung mit 809 einsetzbar
939 ergonomische Handgriffe	□	●	□	□ Mit Gelenke	●	□ Mit Gelenke
927 abnehmbare Griffe	NV	NV	NV	●	□	●
919 Lendenstütze	NV	NV	NV	□	□	□
918 Klappbarer Sitz	NV	NV	NV	□	□	□
815 proximaler Abduktor	□	□	□	□	□	□
946 ergonomischer Sattel	□	□	□	□	□	□
890-C Trennschiene mit Beinführungen	□	□	□	□	□	□
890-SC distaler Abduktor	□	□	□	□	□	□
810 Zusatzgewichte	□	□	□	□	□	□
923 Schiebehilfe für den Begleiter	□	□	□	□	□	□