

Der Gehtrainer GRILLO fördert und erleichtert das Gangbild, trainiert die Balance des Beckens und des Rumpfes, organisiert eine weitere und strukturierte Sicht der Räume, der Abstände und der Umgebung des stehenden Benutzers, entwickelt physische Autonomie und psychische Unabhängigkeit, gibt das Erlebnis der Fähigkeit, allein zu arbeiten, ohne die Hilfe von anderen.

Grillo kompensiert den Mangel an Gleichgewicht dank der ergonomischen Unterstützung und des stabilen Untergestelles und ermöglicht somit dem Benutzer, sich auf die Gehfähigkeit zu konzentrieren.

Grillo ist vielseitig und anpassbar dank austauschbaren Teilen, ohne Einsatz von Werkzeugen für verschiedene Krankheitsbilder geeignet.



FDA Zertifiziert USA



Gekennzeichnet CE



- **LEICHTES ALUMINIUMGESTELL**, faltbar für einen einfachen Transport mit **PATENTIERTEM HÖHE EINSTELLSYSTEM**
- **BECKEN und THORAXFÜHRUNG** gepolstert, unabhängig in Höhe, Breite und Umfang einstellbar, ermöglicht dank der Rückenöffnung einen einfachen Zugang. Es umfasst das Kind wie **ZWEI HÄNDE** und verleiht ihm dadurch ein Gefühl der Sicherheit, weshalb es sich völlig angstfrei auf den Schrittablauf konzentrieren kann. Die Thoraxführung ist einstellbar in Neigung und Rückwärts-Vorwärts.
- **ERGONOMISCHE SITZHOSE** bequem und verstellbar, kann für die Reinigung einfach abgenommen werden. Stützt das Kind bei Bedarf, ohne Druck im Genital- und Leistenbereich auszuüben.
- **HALTEBÜGEL**, abnehmbar und in der Höhe einstellbar es wird als Referenz benutzt und als Armlehne
- **UNTERARMSTÜTZEN**, verstellbar in der Höhe, Neigung,

Rotation und Tiefe.

- **Exklusive ORMESA DESIGN RÄDER**, leicht und Pannensicher: 2 Vorderräder schwenkbar, Ø15 cm (Größe Mini und Small) und Ø17,5 cm (Größe Medium und Large) und 2 Vollgummi Hinterräder, Ø20 cm (Größe Mini und Small) und Ø25 cm (Größe Medium und Large).
- **EINSTELLBARE BREMSEN, RÜCKLAUFPERRUNG und PARKBREMSEN** an den Hinterrädern einfach mit dem roten Pedal zu bedienen
- **RICHTUNGSSTABILISATOREN** an den Vorderrädern.
- **HALBELASTISCHE SCHUTZPUFFER** an den Vorderrädern als Schutz gegen Stöße.



Achtung!
Lesen Sie sorgfältig die **Gebrauchs- und Wartungs Anweisungen**

ANTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung

von cm 74 bis cm 120



Gesamtgewicht KG 22,5
Max. Belastung 90 KG

POSTERIOR

Innenumfang Becken - und Thoraxführung

von cm 74 bis cm 120




Gesamtgewicht KG 21,7
Max. Belastung 90 KG

HÖHE DES BENUTZERS:

Höhe des Benutzers: (C):

GRILLO Medium, von 110 bis 165 cm

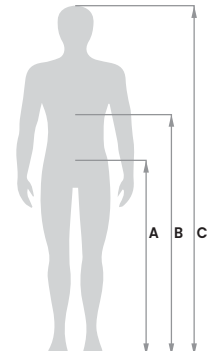

WICHTIG:

Sich versichern dass die Höhen A und B mit den Höhen des Becken - und Thoraxringes übereinstimmen.

Anterior

Posterior

WÄHLEN SIE DIE KONFIGURATION >	Anterior			Posterior		
	PT	PA	P	PT	PA	P
KOMPONENTEN ▾ 925, 924, 930 Sie können die kleinere Größe wählen	<input type="checkbox"/> Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	<input type="checkbox"/> Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	<input type="checkbox"/> Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Haltebügel	<input type="checkbox"/> Mit: > Thorax- und Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe	<input type="checkbox"/> Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Unterarmauflagen	<input type="checkbox"/> Mit: > Beckenführung > Ergonomische Sitzhose > Handgriffe
865 Multiverstellbare Kopfstütze	NV	NV	NV	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925	VERFÜGBAR nur in Kombination Mit Thoraxführung 925
925 Thoraxführung	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Beckenführung	●	●	●	●	●	●
930 Ergonomische Sitzhose	●	●	●	●	●	●
926 verstellbarer Haltebügel	●	<input type="checkbox"/>	●	NV	NV	NV
809 Unterarmauflagen	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mit Gelenke	●	<input type="checkbox"/> Mit Gelenke
943 Armgurte	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nur in Verbindung mit 809 einsetzbar
939 ergonomische Handgriffe	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mit Gelenke	●	<input type="checkbox"/> Mit Gelenke
927 abnehmbare Griffe	NV	NV	NV	●	<input type="checkbox"/>	●
919 Lendenstütze	NV	NV	NV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
918 Klappbarer Sitz	NV	NV	NV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
815 proximaler Abduktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
946 ergonomischer Sattel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-C Trennschiene mit Beinführungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-SC distaler Abduktor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
810 Zusatzgewichte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
923 Schiebehilfe für den Begleiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
928 Hinterräder für schmales Gestell mit Fußbedienbare Feststellbremsen. NUR FÜR DEN INNENBEREICH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>